

Gracey Curettes / Scalers

グレイシーキュレット / スケーラー



Thinking ahead. Focused on life.

シャンク / ブレード

国内鉄鋼メーカーと共同開発した「YDMオリジナル刃物用スチール」を採用。

包丁や刃物に使われるハイカーボステンレス鋼をYDM独自の技術で、より高い切れ味、しなやかさ、耐食性のトータルバランスに優れた素材を使用しています。

シャンク	特 長	ブレードの幅	しなり	刃の長さ	第一シャンクの長さ
ハードタイプ	しなりが少なく、側方圧が加えやすい。比較的強固な歯石や多量の歯石除去に適しています。		少	標準	標準
ソフトタイプ	しなりがあり、微細な感覚が手指に伝わりやすい。超音波スケーラー、エアスケーラーの仕上げや細やかなSRPIに適しています。		多	標準	標準
ミニタイプ	ブレード部が小さく、第一シャンクが長くなっており、挿入しにくい深いポケット内にも挿入しやすくなっています。しなりが少なく、強固な歯石にも対応でき、超音波スケーリング後の取り残しにも有効です。		少	短	長

ハンドル

カラフィー



カラフルな色・見やすい規格表示で目的のインスツルメントを明確に識別できます。
ハンドル表面はシリコン加工を行うことで手にフィットしやすく滑りにくくなっています。
また凹凸が少ないので洗浄しやすい形状になっています。



ハンドル径	オートクレーブ滅菌
10.0～12.0mm	耐熱温度 260℃

丸柄 サクラ



サクラ模様は見た目だけではなく、滑り止めの効果も考えてデザインしています。
ハンドルは持ちやすく力を加えやすい太さで、疲労感も少なく感じられます。

ハンドル径	オートクレーブ滅菌
9.5mm	

スケルトン



ハンドル表面がシリコンで被われているため、長時間のスケーリングでも手指が痛くなりになっています。



ハンドル径	オートクレーブ滅菌
9.0mm	耐熱温度 260℃

角 柄



ハンドルが細い分、先端の感覚が手指に敏感に伝わります。

ハンドル径	オートクレーブ滅菌
6.5mm	

※薬液消毒可、禁忌薬剤あり、添付文書をご確認下さい。

Gキュレット

カラフィー

丸柄 サクラ

スケルトン

角 柄

カラフルな色・見やすい規格表示で目的のインスツルメントを明確に識別できます。※カラフィーミニタイプは従来品より刃部を小さくし、操作性をアップしました。



Gキュレット カラフィー ハードタイプ #G7-8




Gキュレット カラフィー ソフトタイプ #G9-10



Gキュレット 丸柄サクラ ミニタイプ #G5-6

ハードタイプ / ソフトタイプ

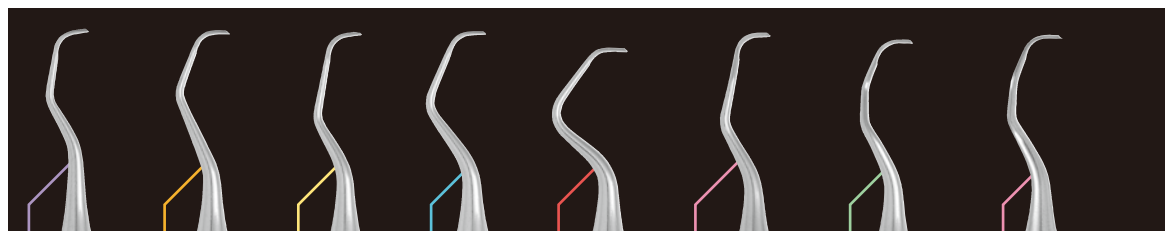

#G1-2
前歯部

#G3-4
前歯部

#G5-6
前歯部・
小臼歯部

#G7-8
臼歯部頬舌面

#G9-10
臼歯部頬舌面
根分岐部

#G11-12
臼歯部近心面

#G13-14
臼歯部遠心面

#G15-16
臼歯部近心面

ミニタイプ



#G1-2
前歯部

#G3-4
前歯部

#G5-6
前歯部・
小臼歯部

#G7-8
臼歯部頬舌面

#G11-12
臼歯部近心面

#G13-14
臼歯部遠心面

#G15-16
臼歯部近心面



販売名: Gキュレット 一般的名称: 歯周用キュレット 医療機器届出番号: 11B1X1000662D102 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)
販売名: Gキュレット ミニ 一般的名称: 歯周用キュレット 医療機器届出番号: 11B1X1000662D106 医療機器の分類: 一般医療機器(クラスI)

スケーラー 両頭 #204SD

カラフィー

丸柄 サクラ

スケルトン

角 柄

ブレード部が小さく、シャンク部の複屈曲デザインにより、臼歯部隣接面へのアプローチが容易になります。
縁上スケーリングにおける超音波スケーラー、エアースケーラー使用後の仕上げに適しています。



スケーラー 両頭 カラフィー #204SD



スケーラー 両頭 丸柄サクラ #204SD



スケーラー 両頭 スケルトン #204SD



シャンク部を複屈曲したことにより、
特に臼歯部遠心面へのアプローチが
容易になりました。

スケーラー ペア

カラフィー

丸柄 サクラ

スケルトン

丸 柄

角 柄

スタンダードな組合せのスケーラーです。

#1 シャンク部がストレートのデザインであるため、前歯部の隣接歯間部の縁上スケーリングに適しています。



スケーラー ペア カラフィー #1



スケーラー ペア 丸柄サクラ #1

#2 シャンク部が傾斜しているデザインのため、臼歯部の歯頸部から隣接面まで容易に操作できます。



スケーラー ペア カラフィー #2



スケーラー ペア 丸柄サクラ #2

商 品 名		規 格	品目コード	標準価格
Gキュレット カラフィー	ハード タイプ	#G1-2	2015106881-2	4,600円
		#G3-4	2015106883-4	
		#G5-6	2015106885-6	
		#G7-8	2015106887-8	
		#G9-10	2015106889-10	
		#G11-12	20151068811-12	
		#G13-14	20151068813-14	
		#G15-16	20151068815-16	
	ソフト タイプ	#G1-2	2015106891-2	4,600円
		#G3-4	2015106893-4	
		#G5-6	2015106895-6	
		#G7-8	2015106897-8	
		#G9-10	2015106899-10	
		#G11-12	20151068911-12	
		#G13-14	20151068913-14	
		#G15-16	20151068915-16	
	ミニ タイプ	#G1-2	2015106901-2	4,600円
		#G3-4	2015106903-4	
		#G5-6	2015106905-6	
		#G7-8	2015106907-8	
		#G11-12	20151069011-12	
		#G13-14	20151069013-14	
		#G15-16	20151069015-16	
Gキュレット 丸柄サクラ	ハード タイプ	#G1-2	2015106071-2	3,900円
		#G3-4	2015106073-4	
		#G5-6	2015106075-6	
		#G7-8	2015106077-8	
		#G9-10	2015106079-10	
		#G11-12	20151060711-12	
		#G13-14	20151060713-14	
		#G15-16	20151060715-16	
	ソフト タイプ	#G1-2	2015106091-2	3,900円
		#G3-4	2015106093-4	
		#G5-6	2015106095-6	
		#G7-8	2015106097-8	
		#G9-10	2015106099-10	
		#G11-12	20151060911-12	
		#G13-14	20151060913-14	
		#G15-16	20151060915-16	
	ミニ タイプ	#G1-2	2010107621-2	3,900円
		#G3-4	2010107623-4	
		#G5-6	2010107625-6	
		#G7-8	2010107627-8	
		#G11-12	20101076211-12	
		#G13-14	20101076213-14	
		#G15-16	20101076215-16	
Gキュレット スケルトン	ハード タイプ	#G1-2	2015105851-2	3,600円
		#G3-4	2015105853-4	
		#G5-6	2015105855-6	
		#G7-8	2015105857-8	
		#G9-10	2015105859-10	
		#G11-12	20151058511-12	
		#G13-14	20151058513-14	
		#G15-16	20151058515-16	
	ソフト タイプ	#G1-2	2015105871-2	3,600円
		#G3-4	2015105873-4	
		#G5-6	2015105875-6	
		#G7-8	2015105877-8	
		#G9-10	2015105879-10	
		#G11-12	20151058711-12	
		#G13-14	20151058713-14	
		#G15-16	20151058715-16	
	ミニ タイプ	#G1-2	2010107611-2	3,600円
		#G3-4	2010107613-4	
		#G5-6	2010107615-6	
		#G7-8	2010107617-8	
		#G11-12	20101076111-12	
		#G13-14	20101076113-14	
		#G15-16	20101076115-16	

商 品 名		規 格	品目コード	標準価格	
Gキュレット 角柄	ハード タイプ	#G1-2	2015105771-2	3,300円	
		#G3-4	2015105773-4		
		#G5-6	2015105775-6		
		#G7-8	2015105777-8		
		#G9-10	2015105779-10		
		#G11-12	20151057711-12		
		#G13-14	20151057713-14		
		#G15-16	20151057715-16		
	ソフト タイプ	#G1-2	2015105791-2	3,300円	
		#G3-4	2015105793-4		
		#G5-6	2015105795-6		
		#G7-8	2015105797-8		
		#G9-10	2015105799-10		
		#G11-12	20151057911-12		
		#G13-14	20151057913-14		
		#G15-16	20151057915-16		
	ミニ タイプ	#G1-2	2010107601-2	3,300円	
		#G3-4	2010107603-4		
		#G5-6	2010107605-6		
		#G7-8	2010107607-8		
		#G11-12	20101076011-12		
		#G13-14	20101076013-14		
			#G15-16	20101076015-16	
	スケーラー両頭 カラフィー		#204SD	201510692	4,600円
スケーラー両頭 丸柄サクラ		#204SD	201510617	4,200円	
スケーラー両頭 スケルトン		#204SD	201510616	3,900円	
スケーラー両頭 角柄		#204SD	201510615	3,600円	
スケーラーベア カラフィー		#1	2015106911	4,600円	
		#2	2015106912		
スケーラーベア 丸柄サクラ		#1	2015105691	4,200円	
		#2	2015105692		
スケーラーベア スケルトン		#1	2015105751	3,900円	
		#2	2015105752		
スケーラーベア 丸柄		#1	2015105731	3,800円	
		#2	2015105732		
スケーラーベア 角柄		#1	2015105711	3,600円	
		#2	2015105712		

<関連商品>

シャープナー Re Born



快適なSRPには、キュレットの鋭利さが重要です。歯周組織へのダメージを少なくし、より効果的なSRPを行うためには、日々のシャープニングが必要です。ReBornは、簡単、かつ短時間にシャープな刃を取り戻せるシャープナーです。

- 標準価格 48,000円 201010110
 販売:株式会社YDM
 ■仕様
 寸法:W107×D57×H54mm
 質量:約170 g (乾電池除く)
 ■付属品
 セラミック砥石・ダイヤモンド砥石 各1入
 シャープニングテスター 1入
 インstrumentキャップ 1入
 グレーシーキュレット用ガイド版 1入
 単3形アルカリ乾電池 2入

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



発売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380.2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834.6161

製造販売 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042

お問合せ お客様相談センター T 0800.222.8020(フリーコール)
※歯科医療従事者様専用

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。
●掲載商品の標準価格は、2016年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●ご使用に際しましては、製品に添付の説明書を必ずお読みください。

PUB: NO. M207.2475-1-000.1610.72,300S-IO 208530167